

# LA SÉCURITÉ DU PATIENT À CHAQUE ÉTAPE.

Le système Smart CapnoLine<sup>MC</sup> Guardian est conçu pour les interventions d'endoscopie supérieure.



## Caractéristiques et avantages recherchés

- Exerce une surveillance continue de l' $\text{etCO}_2$  tout au long de l'intervention pour assurer une ventilation adéquate
- Dispense un débit d' $\text{O}_2$  élevé ( $> 10 \text{ l/min}$ )

## Pièce de morsure Smart CapnoLine<sup>MC</sup> Guardian

- Protège les endoscopes
- Maintient la stabilité sans diminuer la manœuvrabilité de l'endoscope
- Convient aux endoscopes de calibre de 60 Fr et moins

Le système Smart CapnoLine<sup>MC</sup> Guardian est conçu pour le prélèvement d'échantillons de  $\text{CO}_2$  de fin d'expiration ( $\text{etCO}_2$ ) et l'administration d'oxygène d'appoint ( $\text{O}_2$ ) durant des interventions d'endoscopie supérieure. La ligne combinée de prélèvement d' $\text{etCO}_2$  et d'administration d' $\text{O}_2$  s'insère dans la pièce de morsure pour éviter d'endommager les appareils d'endoscopie délicats.

## Utilisation du système Smart CapnoLine<sup>MC</sup> Guardian

### Avant l'intervention :

La ligne de prélèvement oral/nasal Smart CapnoLine<sup>MC</sup> est installée sur le patient pour permettre une surveillance adéquate de la ventilation et l'administration nasale d'oxygène durant une sédation procédurale.

### Durant l'intervention :

La pièce de morsure Smart CapnoLine<sup>MC</sup> Guardian est insérée dans la bouche du patient, raccordée à la ligne de prélèvement du patient et fixée au visage à l'aide de la bande.


### Après l'intervention :

La ligne de prélèvement oral/nasal Smart CapnoLine<sup>MC</sup> reste en place pour poursuivre la surveillance adéquate de la ventilation durant la période de récupération après l'intervention.



## Caractéristiques des produits

### Prélèvement d'etCO<sub>2</sub> et administration d'O<sub>2</sub>

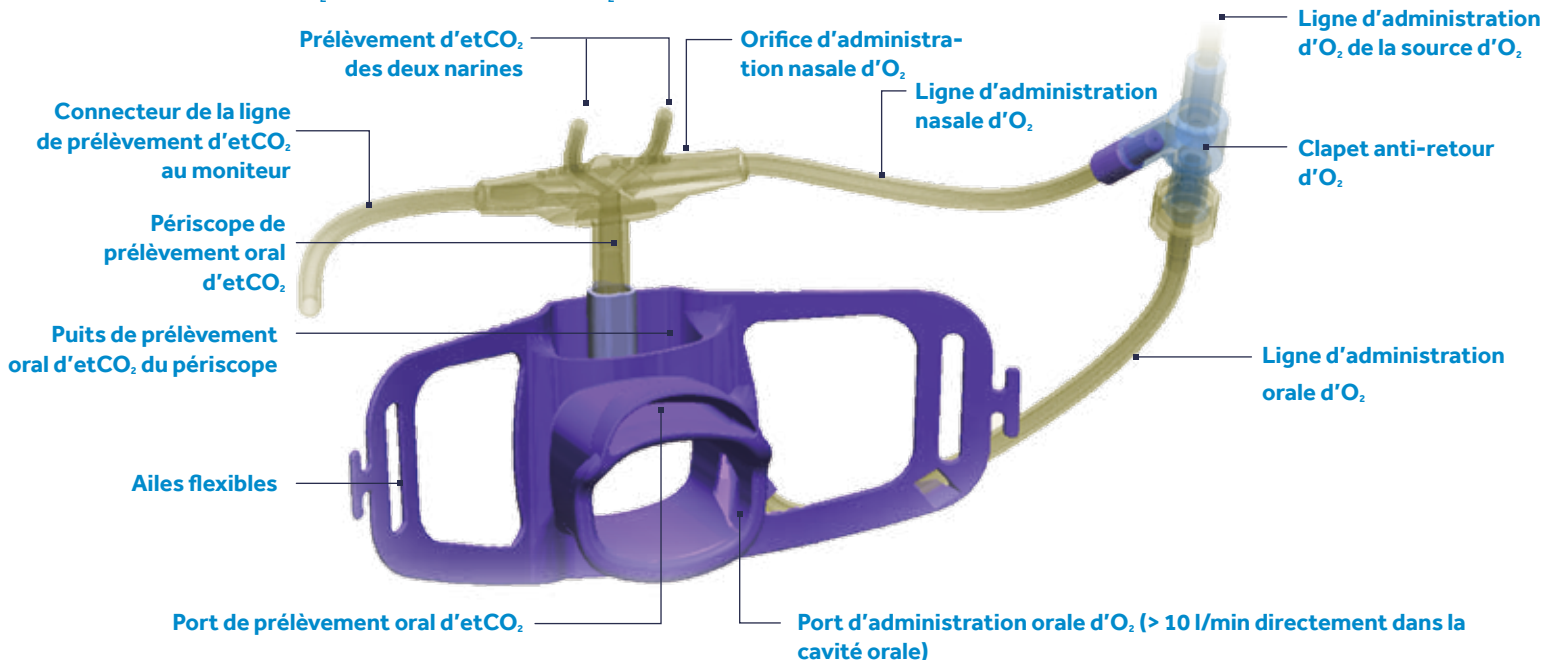

Le système Smart CapnoLine<sup>MC</sup> Guardian comprend une canule de prélèvement d'etCO<sub>2</sub> et une pièce de morsure.

#### Principales applications :

Endoscopie supérieure, EGD, CPRE, bronchoscopie et échographie transœsophagienne

DESCRIPTION DU PRODUIT	NUMÉRO D'ARTICLE
Connecteur d'O <sub>2</sub> Smart CapnoLine <sup>MC</sup> Guardian (2 m)	012528
Sonde à oxygène Smart CapnoLine <sup>MC</sup> Guardian (2 m)	012529
Sonde à oxygène Smart CapnoLine <sup>MC</sup> Guardian longue (4 m)	012530
Connecteur d'O <sub>2</sub> Smart CapnoLine <sup>MC</sup> Guardian (2 m), 100	012537
Sonde à oxygène Smart CapnoLine <sup>MC</sup> Guardian (2 m), 100	012538
Sonde à oxygène Smart CapnoLine <sup>MC</sup> Guardian long. (4 m), 100	021539
Crochet et bandoulière à boucle	012542

Tous les produits d'échantillonnage d'haleine sont à usage unique. Tous les produits d'échantillonnage d'haleine FilterLine<sup>®</sup> sont exempts de latex. Conçus pour les patients pouvant porter une pièce de morsure de 60 Fr durant des interventions d'endoscopie supérieure. 25 unités par emballage, sauf indication contraire. Les lignes de prélèvement et les sondes à oxygène FilterLine<sup>®</sup> sont offertes dans les longueurs suivantes : 2 m (6,5 pi) et 4 m (13 pi). Tous les produits Smart CapnoLine<sup>MC</sup> Guardian sont de calibre 60 Fr. Le système Smart CapnoLine<sup>MC</sup> Guardian est compatible avec l'environnement IRM. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

FilterLine<sup>®</sup> et CapnoLine<sup>MC</sup> sont des marques déposées et Smart CapnoLine<sup>MC</sup> Guardian est une marque de commerce d'Oridion Medical 1987 Ltd. Les produits Oridion sont protégés par les brevets américains suivants : 6,422,240; 5,857,461; 6,437,316; 6,926,005; 5,657,750; 7,383,839 et leurs équivalents étrangers. Autres demandes de brevet en instance.

**IMPORTANT :** Consulter les instructions complètes, ainsi que les indications, contre-indications, mises en garde et précautions, dans la notice d'emballage.

medtronic.com

\*Le contenu du site vise un public mondial et n'est pas spécifique au public canadien.  
Les affirmations faites dans la présente brochure sont basées sur des études cliniques.  
© 2016 Medtronic. Tous droits réservés. Le logo Medtronic et plus loin, ensemble sont des marques de commerce de Medtronic.  
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété d'une société affiliée à Medtronic. Licence de Santé Canada détenue par Covidien Ilc  
Fabriqué par : Covidien Ilc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 États-Unis  
CA-PMR-0082-F Rév. 07-2016

8455, autoroute Transcanadienne  
Saint-Laurent (Québec) H4S 1Z1

877 664-8926 [tél.]  
800 567-1939 [télé.]

**Medtronic**