


Medtronic

Desempenho ideal simplificado.

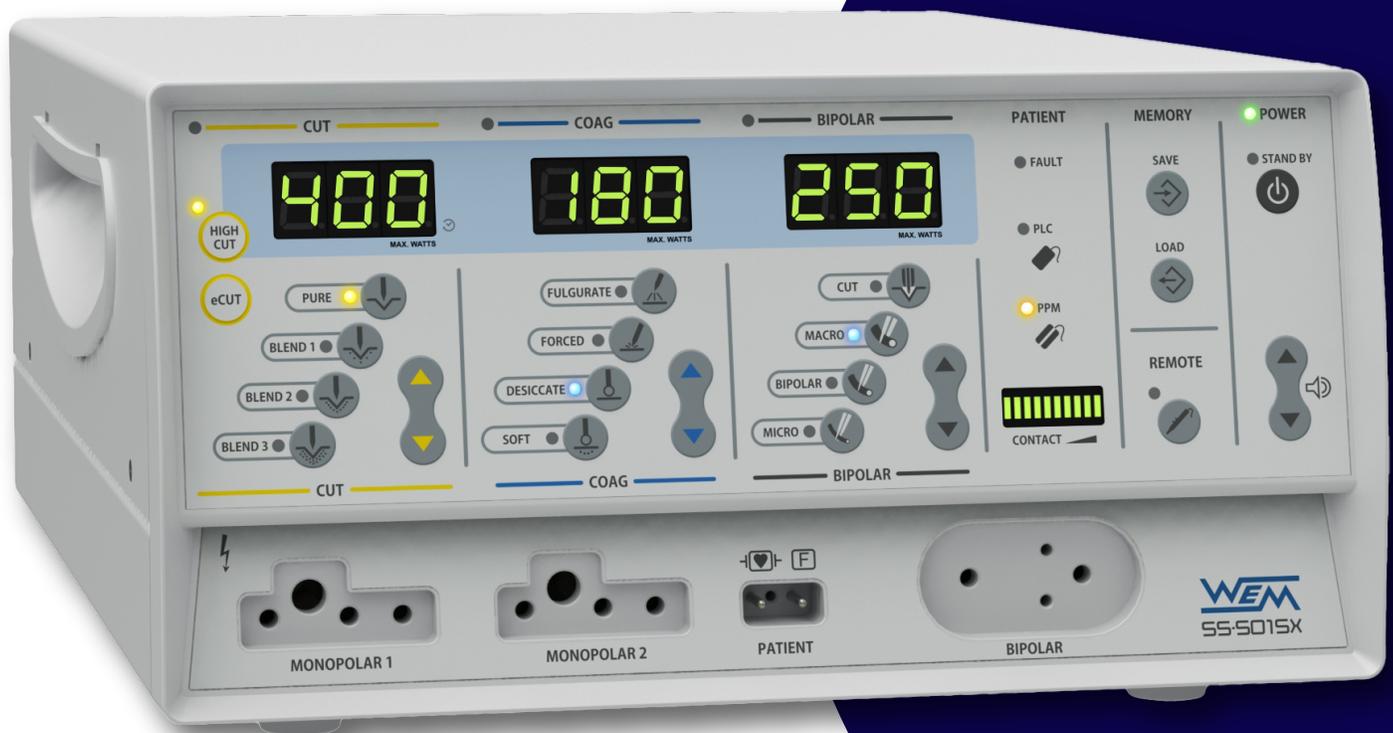

SS-501SX

Bisturi Eletrônico Microprocessado

O bisturi eletrônico microprocessado SS-501SX agrega valor à sala de cirurgia ao combinar as funções básicas de um gerador eletrocirúrgico com funções específicas de controle e segurança.

Controle

Obtenha o desempenho desejado escolhendo um dos vinte modos monopolares e bipolares disponíveis.

Segurança

Funções de segurança integradas, incluindo sistema de monitoramento de qualidade de contato entre o eletrodo de retorno e o paciente, que bloqueia o fornecimento de energia em caso de perda de aderência ou descolamento do eletrodo.

Desempenho

Inclui o exclusivo sistema EZCut que auxilia a inicialização dos cortes, além da função High Cut para maior eficiência em corte de tecidos de alta impedância.

Simple

Possui a função *Remote* que permite o ajuste de potência de saída dos acessórios manuais na área cirúrgica.



Especificações técnicas básicas da SS-501SX

Dimensões do produto
(D X A X A) 397 x 300 x 163 mm

Peso do produto
5,45 Kg

Faixa de alimentação de tensão elétrica
100 a 240 VCA com seleção de automática de tensão

Frequência nominal
50 / 60 Hz

Potência máxima de entrada
1 kVA

Classificação de ingresso /derramamento de líquido
IP21


Entrada/Perda de Líquido - Pedal
IPX7

Potência máxima de saída
400 W

Faixa de ajuste de potência
1 Watt (e microbipolar em 0,5 Watt)

Tolerância de potência de saída
15% ou 5 Watts
(O que for maior)

Frequência básica da unidade
390 kHz Senoidal

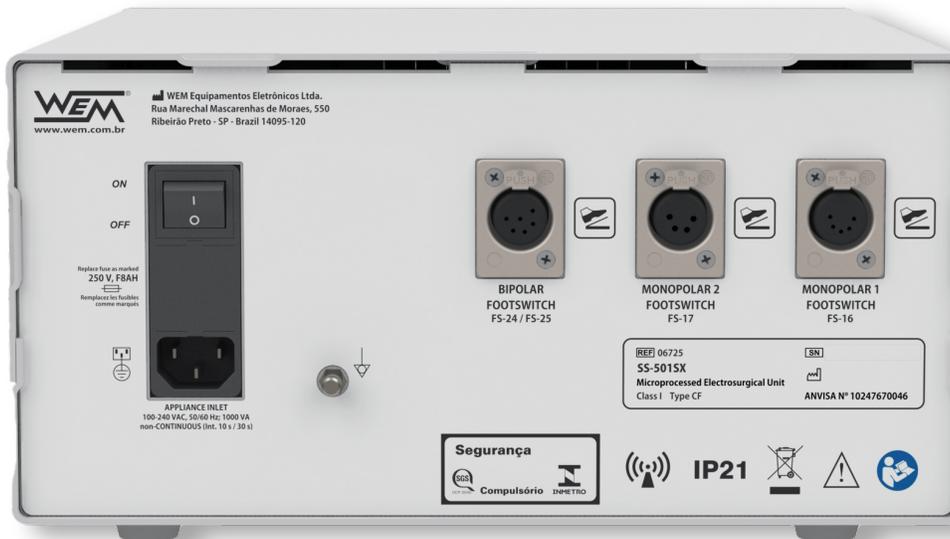

Código do pedido	Modelo comercializado	Descrição do produto
06725	SS-501SX	Bisturi eletrônico microprocessado
Acessórios		
06523	FS-16	Pedal duplo, Monopolar 1 para SS-501SX
06524	FS-17	Pedal duplo, Monopolar 2 para SS-501SX
09922	FS-25	Pedal duplo, Bipolar para SS-501SX
09921	FS-24	Pedal duplo, Bipolar para SS-501SX
Verifique as opções disponíveis de cabos de alimentação		

Conteúdo apenas para profissionais da saúde.

Verifique a disponibilidade e a configuração do produto em sua região com nossos representantes de vendas.

Registros Anvisa: 10247670046

© 2025 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logotipo da Medtronic e "Engenharia para o extraordinário" são marcas registradas da Medtronic. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa Medtronic. A WEM é uma empresa que faz parte do grupo Medtronic.

Medtronic